

APARATY DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ

Szeroka gama aparatów do elektroforezy horyzontalnej **Horel**. Komora do elektroforezy posiada platynowe elektrody oraz pokryte złotem wtyki do podłączenia kabli zasilających. Pokrywa ma zainstalowane na stałe kable zasilające i otwory wentylacyjne zapobiegające skraplaniu się pary wodnej. Żele wlewane są w zewnętrznej przystawce, w którą wyposażony jest aparat. Saneczki na żel wykonane są z plexi przepuszczającej UV, dzięki czemu można umieścić je na transiluminatorze.

Saneczki w zależności od rozmiaru aparatu posiadają kilka pozycji, w której jednoznacznie można umieścić uchwyty z grzebieniami. Do uniwersalnych uchwytów można zamontować dowolny grzebień spośród dedykowanych dla danego typu aparatu. W ofercie występują grzebienie o różnych grubościach, ilościach i pojemnościach dołków (także kompatybilne z pipetą wielokanałową).

Jako dodatkowe opcje w aparatach mogą występować nóżki poziomujące, specjalne ograniczniki umożliwiające wylewanie żelu w aparacie, czy porty do recyrkulacji buforu.

Do aparatu dodatkowo można dokupić: uchwyty, grzebienie, saneczki na żel, czy stoliki do wylewania żelu.

Na zamówienie indywidualne wykonywane są także saneczki na żel o dowolnych rozmiarach, grzebienie, czy nawet całe aparaty.


Aparaty **Horel** charakteryzują się wysoką estetyką, a przy tym dość prostą budową gwarantującą łatwość przeprowadzenia i kontrole całego procesu elektroforezy. Wylewanie żelu jest niezwykle proste i szybkie.

Aparaty **Horel** posiadają największą na rynku dostępność dodatkowych akcesoriów (np. może być wykonany grzebień o dowolnej liczbie zębów).

Aparaty objęte są gwarancją, a ewentualny serwis pogwarancyjny np. wymiana uszkodzonej elektrody na nową są bardzo proste, tanie i mogą być przeprowadzone przez użytkownika.



Wcięcia ustalające pozycję grzebienia

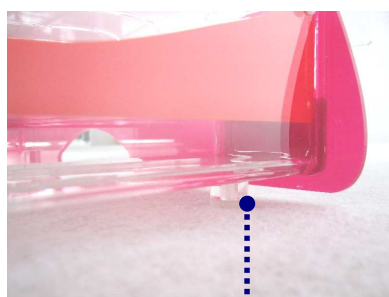


Nóżki poziomujące (opcja)

Saneczki


Grzebień

Uchwyt

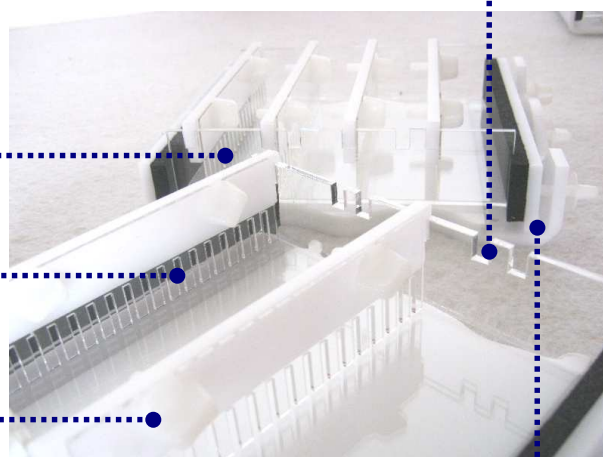


Stolik do wylewania

Ograniczniki do wylewania żelu (opcja)

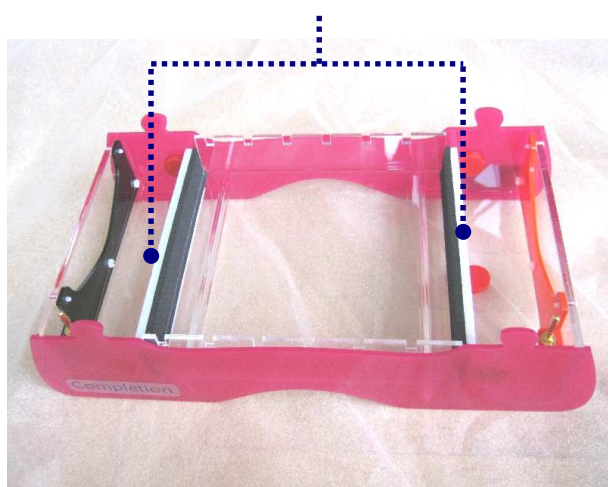

Elektrody platynowe

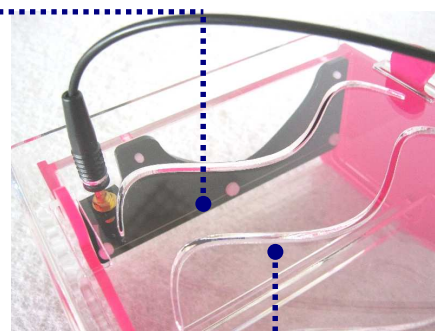


Otwory w pokrywie

Aparaty na zamówienie indywidualne

Wykonujemy także aparaty na zamówienia indywidualne, uwzględniające wszystkie wymagania Klienta.

Dorabiamy także elementy (grzebień, uchwyty, saneczki, itp...) do aparatów innych firm.

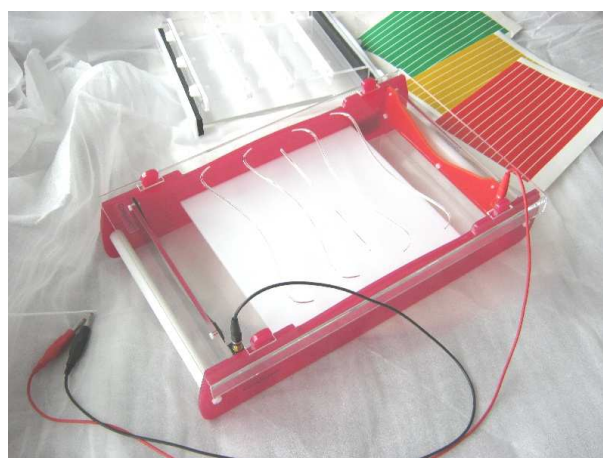

Completion

Sprzedaż i dystrybucja:
COMPLETION.PL
email: completion@completion.pl